



# Botão de *Fechamento de Crânio*

Registro ANVISA: 80071910092

O Botão de Fechamento de Crânio é um dispositivo médico implantável projetado para estabilizar e restaurar as funções do crânio em casos de traumas cranioencefálicos, tumores cerebrais e outras condições que requerem a fixação de segmentos ósseos do crânio.

Seu funcionamento se dá por meio da fixação de segmentos ósseos com o uso de placas de baixo perfil e eixo roscado feitos com materiais de alta qualidade para garantir eficácia e resistência na recuperação pós-operatória.




**OSTEOMED**

## Vantagens:

- Design com baixo perfil, aderindo melhor a anatomia do crânio;
- Não necessita de placas e parafusos para fixação;
- Melhor estabilização na fixação do retalho.

## Disponível em 3 tamanhos

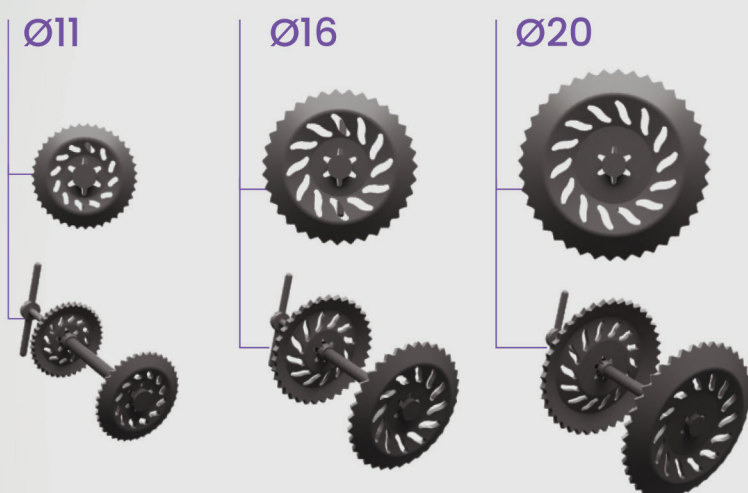

## Indicações:

- Cirurgias de Cranioplastia;
- Cirurgias de Craniotomia (Furos de Trepá);
- Fixação de fraturas em trauma cranianos;



O Conjunto de Botão de Fechamento de Crânio é composto por placas de concepção complexa em formato circular e um corpo roscado. Ele é projetado para estabilizar e fixar segmentos ósseos na região cranial em diversas patologias e situações cirúrgicas.

As placas têm espessura de 0,6mm e são feitas de Titânio Puro Gr.2, enquanto o corpo roscado é feito de Ti-6Al-4V.

## Kit Botão de Fechamento de Crânio

Com um design minimalista o Kit de Botão de fechamento de Crânio, conta com os recursos necessários para a implantação dos Botões.

- 30.061.00046 - Alicates de Corte para Placas
- 30.053.00008 - Pinça Ponta curva
- 30.068.00001 - Botão Ø11mm
- 30.068.00002 - Botão Ø16mm
- 30.068.00003 - Botão Ø20mm

  /Osteomed Implantes

 @osteomed\_implantes

 /osteomedimplantes

[www.osteomedimplantes.com](http://www.osteomedimplantes.com)

Telefone: (19) 3522-3064

Rod. Washington Luiz

Cond. Conpark - Rio Claro - SP - Brazil

