



**OSTEOMED**

Kit para

**Bloqueio da dor**

Registro ANVISA: 80071919015



**Lançamento**

Produtos de **qualidade**  
a **serviço da vida.**



## Kit para **Bloqueio da dor**


O Kit para Bloqueio da dor OSTEOMED é indicado para procedimentos de bloqueio de nervos periféricos e articulações, onde a estimulação é necessária para a localização precisa do nervo alvo.

As duas cânulas do kit possuem uma cobertura refletiva, garantindo visualização ecogênica perfeita por ultrassom. Para a estimulação e localização do nervo, é necessário utilizar um equipamento estimulador de nervos.

Imagens meramente ilustrativas

As cânulas do kit são compatíveis com qualquer equipamento de estimulação registrado na ANVISA, desde que possuam as seguintes características:

- Corrente de estimulação:**  
0,05mA - 80mA ( $\pm$  5%);
- Frequência de estimulação:**  
1 Hz - 2Hz ( $\pm$  1%);
- Duração do estímulo:**  
0,05ms - 1,0ms ( $\pm$  10%);
- Impedância:**  
0K $\Omega$  - 12K $\Omega$ .

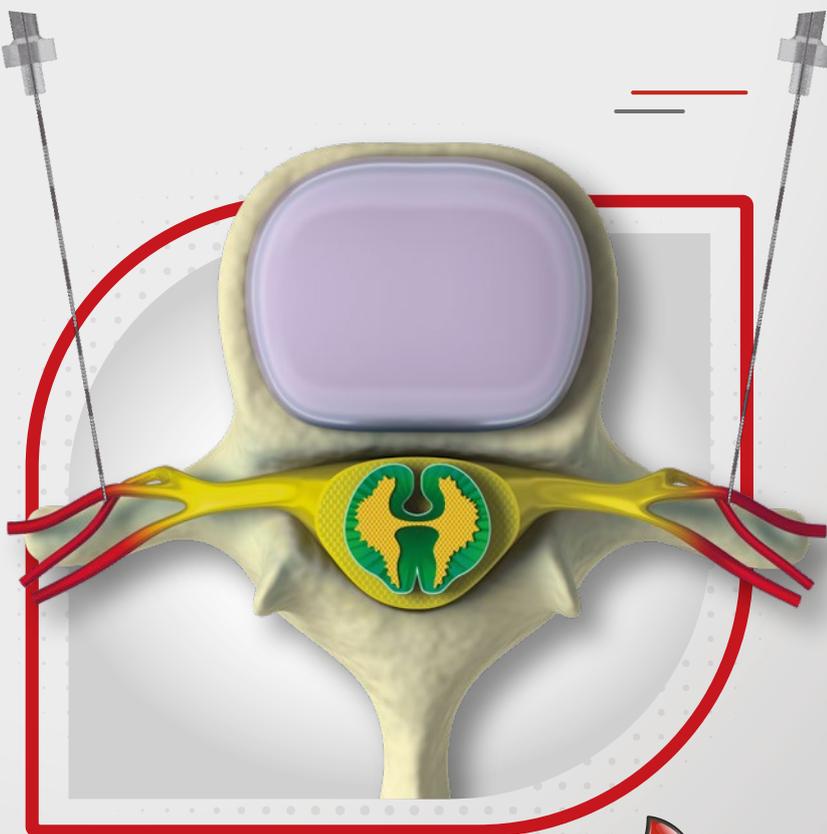


**OSTEOMED**

# Kit para **Bloqueio da dor**

Registro ANVISA: 80071919015

Kit fornecido estéril, selado em duplo blister, destinado a procedimentos de alívio de crônica ou aguda. Este produto utiliza tecnologia de estimulação para garantir um bloqueio nervoso eficaz e seguro.

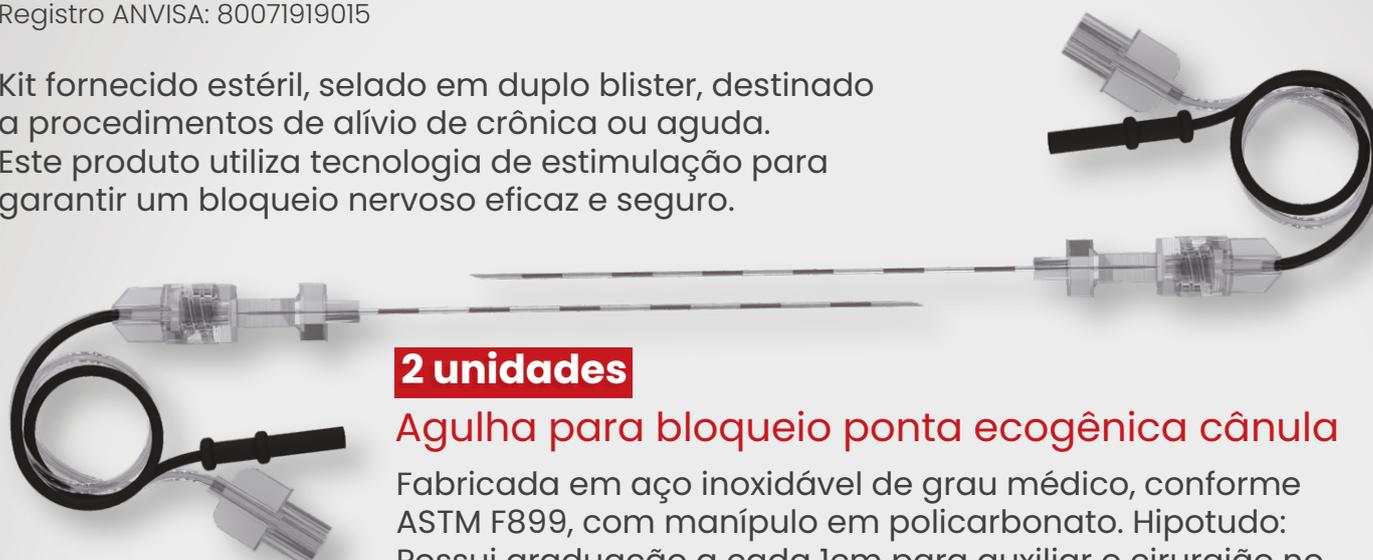

## **2 unidades**

### **Agulha para bloqueio ponta ecogênica cânula**

Fabricada em aço inoxidável de grau médico, conforme ASTM F899, com manípulo em policarbonato. Hipotudo: Possui graduação a cada 1cm para auxiliar o cirurgião no posicionamento preciso da cânula. Ponta: Apresenta ranhuras para melhor visualização por ultrassom.



## **1 unidade**

### **Seringa de 12ml**

## **1 unidade**


### **Manifold com 3 entradas**

possibilita o bloqueio simultâneo de até 3 cânulas.




## **1 unidade**

### **Adesivo Radiopaco com grid**

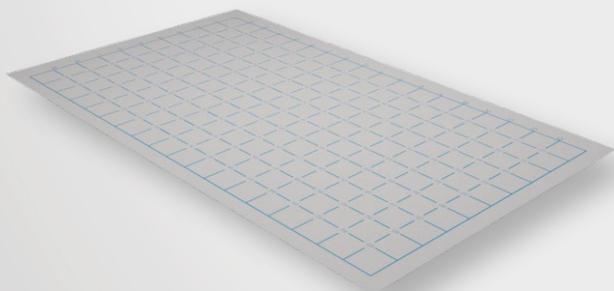


## **1 unidade**

### **Tubo extensor**

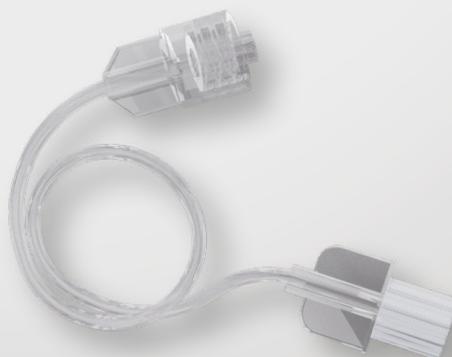

Imagens meramente ilustrativas

# Kit completo

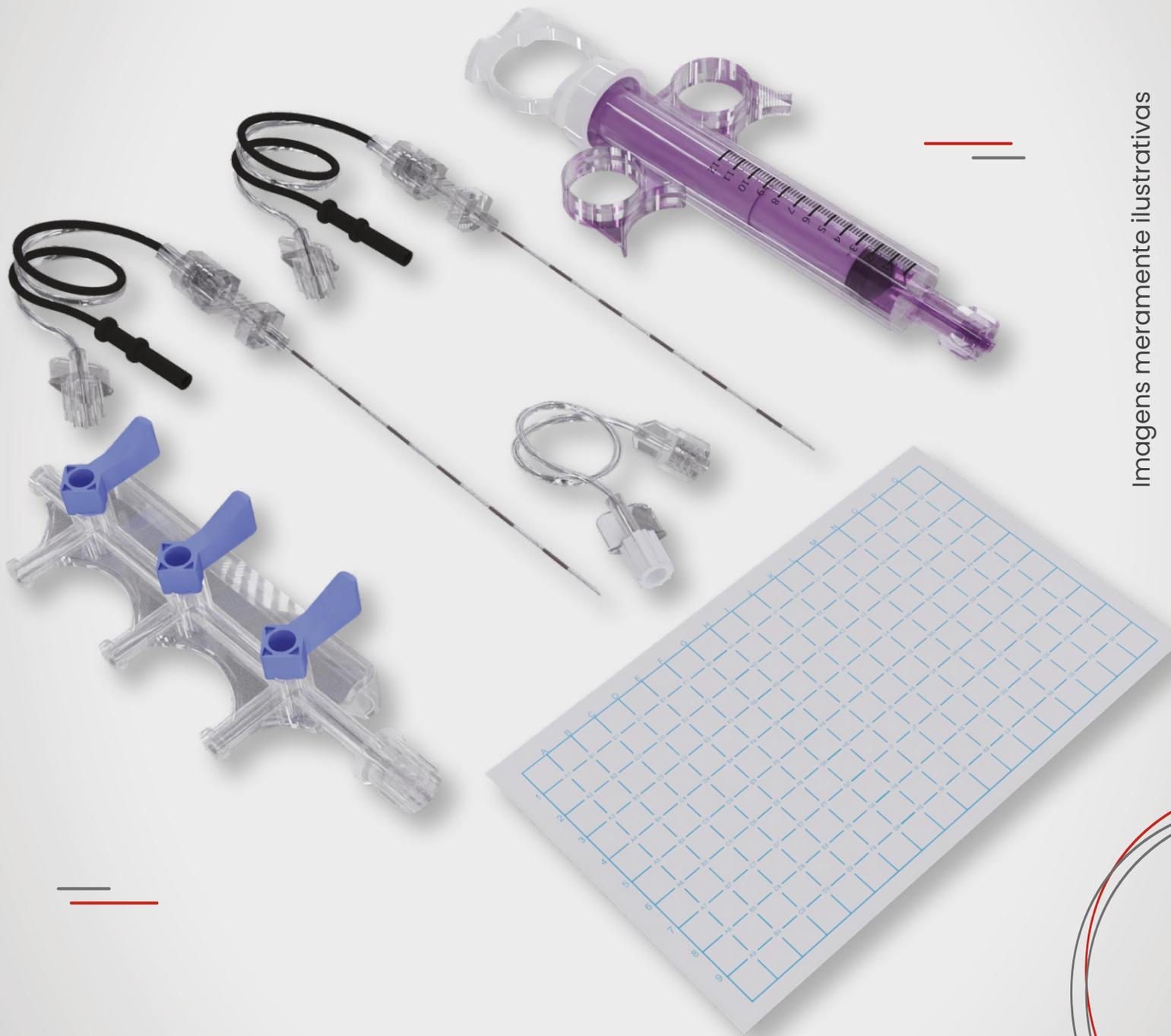

Imagens meramente ilustrativas

## Principais Benefícios:


**Localização Precisa:** Cânulas de estimulação que permitem um acesso seguro aos nervo alvo.

**Aplicação Precisa:** O aplicador graduado facilita a administração exata dos medicamentos necessários.

**Bloqueio Eficaz:** Interrompe os impulsos nervosos causadores de dor, proporcionando alívio imediato.

# Kit para **Bloqueio da dor**

Registro ANVISA: 80071919015

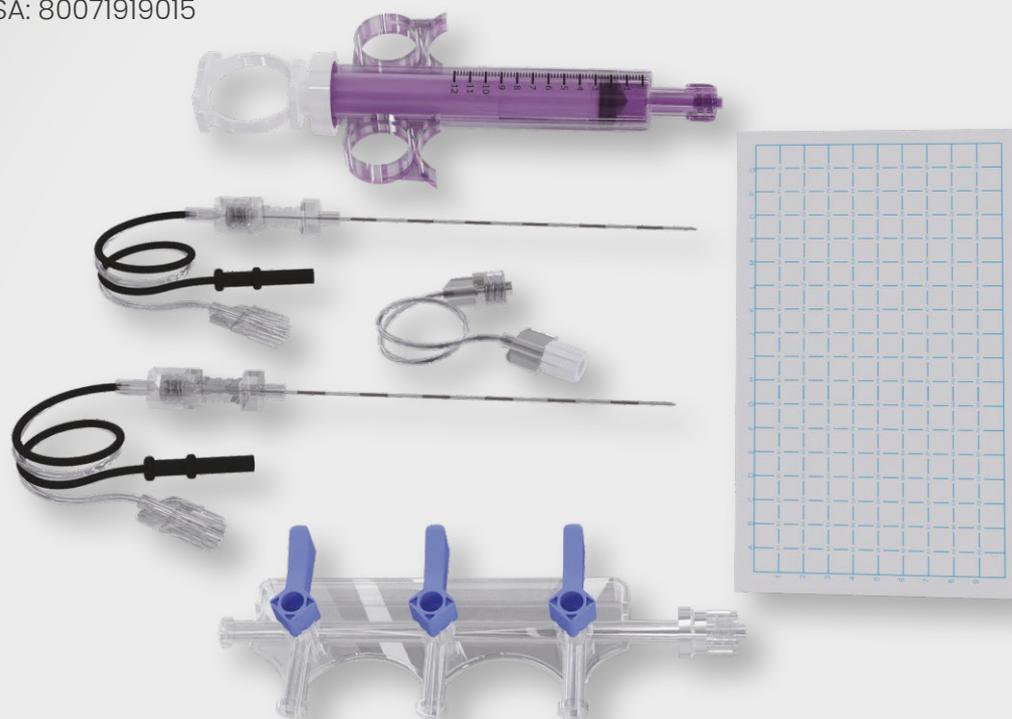

30.074.30007 - CALIBRE 21 G - 100mm

30.074.30008 - CALIBRE 21 G - 150mm

30.074.30011 - CALIBRE 22 G - 100mm

30.074.30012 - CALIBRE 22 G - 150mm

## **Cânula para bloqueio**

Registro ANVISA: 80071919014



30.074.20004 - CALIBRE 21 G - 100mm

30.074.20005 - CALIBRE 21 G - 150mm

30.074.20008 - CALIBRE 22 G - 100mm

30.074.20009 - CALIBRE 22 G - 150mm

\*Para demais medidas, consulte a disponibilidade de estoque.





# Contatos



# OSTEOMED



**Telefone:**  
(19) 3522-3064



**E-mail:**  
comercial@osteomedimplantes.com



**Endereço:**  
Rod. Washington Luis (SP 310), Pista Sul km 172  
Rua 6 S/N - Jd. Anhanguera - Cond. Conpark  
Rio Claro/SP - CEP 13501-600



**Osteomed Implantes**

[www.osteomedimplantes.com](http://www.osteomedimplantes.com)

C.N.P.J 00.638.390/0001-20

A.F.E.ANVISA 800719-1

